


滴点软化点测定仪



型号	上海仪电物光 WQD-1A 滴点软化点测定仪
仪器指标	<ol style="list-style-type: none">1) 测量范围: 室温 ~ 300 °C ;2) 温度显示小值: 0.1°C , 线性升温速率选择: 0.2°C/min、0.5°C/min、1°C/min、1.5°C/min、2°C/min、3°C/min 、4°C/min、5°C/min 共八档;3) 炉温准确度: ≤ 200 °C 时为±0.5 °C , > 200 °C 时为±1 °C;4) 电源: 220V±22V,100W ,50Hz±1Hz
分析能力	石油蜡和石油酯滴熔点的测定
相关标准	GB/T 8026-2014 石油蜡和石油脂滴熔点测定法
仪器特色	<ol style="list-style-type: none">1) 仪器根据 ASTM D3461 标准设计的自动监测仪器, 可代替乌氏法滴点和环球法软化点, 是测量高分子化合物密度、聚合度、耐热性的必备设备;2) 由于采用光电监测设备, 温度控制精确, 自动读数, 操作容易, 认为误差少, 易于清洁;

	3) 仪器广泛应用于焦油、沥青、石蜡、树脂、脂肪、松香、润滑脂、凡士林、食用油脂等过程成分控制及质量检测
--	--

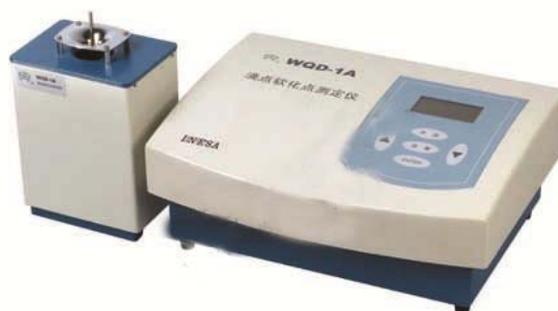

中科合成油